

CLEARFIL™ AP-X Flow




О CLEARFIL™ AP-X Flow

- Легкое дозирование без подтеков
- Новый шприц с эргономичным и удобным дизайном
- Высокая рентгеноконтрастность
- Высокая наполненность (81%) для достижения отличной прочности даже на жевательной группе зубов

Дозирование без подтеков

Материал перестает вытекать после дозирования

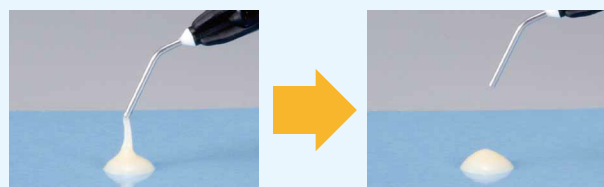

Дизайн шприца

Поршень позволяет извлекать материал без остатка.

Широкий держатель удобно сидит в руке во время нанесения материала.



Маленькое пространство между шприцем и насадкой позволяет экономить материал за счет отсутствия пустот в соединении.

Клиническое применение

- Прямые реставрации фронтальных и жевательных зубов (I-III, V классы, пришеечные дефекты, закрытие устьев корневых каналов)
- Использование в качестве бейзлайнера
- Внутривитовой ремонт коронок/мостов

Рис.1

Изображение полости с нанесением одного слоя CLEARFIL™ AP-X Flow. Текучая консистенция заполняет все неровности и отлично сочетается с натуральной тканью зуба.

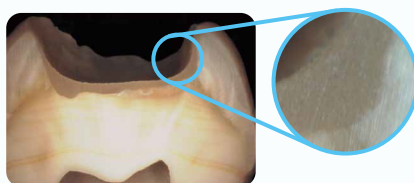


Рис. 2

Полость V класса. CLEARFIL™ AP-X Flow легко заполняет подобную полость без вытекания.



Рис. 3

Реставрация в один слой на фронтальном зубе.



До лечения



Нанесение материала



После лечения

Рис. 4

1. Препарирование полости



2. Заполнение полости



3. Моделирование маргинальных краев




4. Полимеризация и шлифование




КОМПОНЕНТЫ

- CLEARFIL™ AP-X Flow обладает отличными эстетическими показателями и физическими свойствами.
- Самая низкая полимеризационная усадка, по сравнению с прочими текучими композитами.
- CLEARFIL™ AP-X показывает сильнейшую прочность на изгиб и высокий модуль упругости.

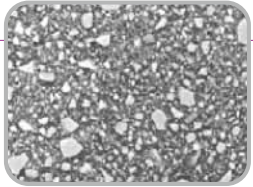


Изображение материала под электронным микроскопом


Процент усадки

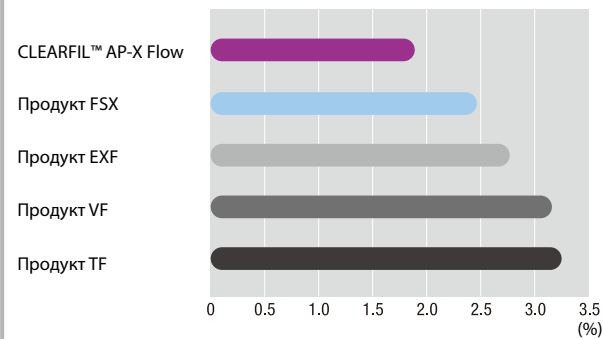

Прочность на изгиб

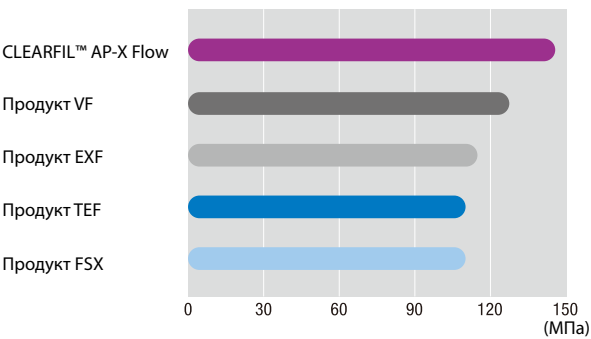

Модуль упругости при изгибе

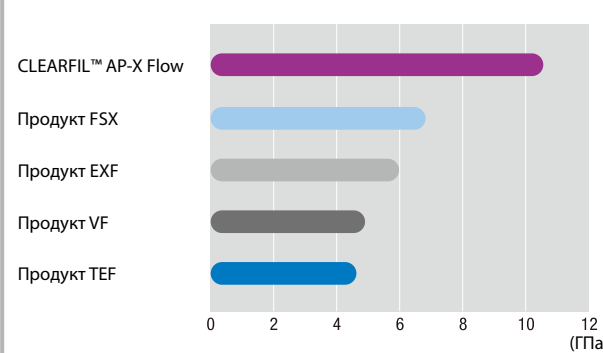


РЕНТГЕНОКОНТРАСТНОСТЬ

Высокая рентгеноконтрастность для контроля работы

CLEARFIL™ AP-X Flow

Рентгеноконтрастность слоя толщиной 1 мм 300% Al.

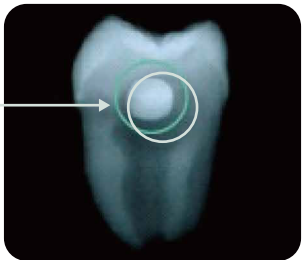

- | | |
|---------|----------------------------|
| 3230-WD | CLEARFIL™ AP-X Flow (A1) |
| 3231-WD | CLEARFIL™ AP-X Flow (A2) |
| 3232-WD | CLEARFIL™ AP-X Flow (A3) |
| 3233-WD | CLEARFIL™ AP-X Flow (A3.5) |
| 3234-WD | CLEARFIL™ AP-X Flow (A4) |
| 3236-WD | CLEARFIL™ AP-X Flow (B2) |
| 3238-WD | CLEARFIL™ AP-X Flow (C3) |
| 3241-WD | CLEARFIL™ AP-X Flow (Cv) |
| 3242-WD | CLEARFIL™ AP-X Flow (OA3) |

шприц 3,2 г (1,5 мл)
насадки 5 шт.

- Ознакомьтесь с инструкцией до начала использования материала.
- Данные о сравнениях материалов основаны на результатах исследований, проведенных Kuraray Noritake Dental Inc.
- Цвета материалов, приведенных в данной брошюре, могут отличаться от фактических цветов.
- Технические характеристики и внешний вид товара могут быть изменены без предварительного уведомления.



г. Москва, ул. Профсоюзная 57, офис 522
+7 495 120 22 74
zakaz@expodent.biz
expo-dent.com

 Kuraray Noritake Dental Inc.