

CLEARFIL™ AP-X



5 очевидных преимуществ CLEARFIL™ AP-X

Опыт клинического применения и научных исследований с 1993 года, гарантируют превосходный эстетический результат и непревзойденную прочность реставрации при использовании данного материала.

Ознакомьтесь с **пятью главными преимуществами**:



1 Высочайшая износостойчивость

CLEARFIL™ AP-X - это высоконаполненный микрогибридный композит. Наполненность материала частицами бариевого стекла достигает 85%. Такой показатель является одной из причин непревзойденной износостойкости CLEARFIL™ AP-X.

2 Отличная полируемость

Большое число частиц наполнителя с размером 0,04 мкм обеспечивают отличную полируемость. Это позволяет получить великолепный эстетический результат при реставрации фронтальной группы зубов.

3 Низкая полимеризационная усадка

Высокая наполненность материала так же является причиной низкой усадки (1,9%) материала при полимеризации. Это позволяет значительно снизить стрессовую нагрузку на стенки полости, что приводит к снижению риска появления послеоперационной чувствительности и возникновению вторичного кариеса в случае частичной расцементировки полости.

4 Рентгеноконтрастность


Высокий процент содержания частиц бария как наполнителя, придает материалу отличную рентгеноконтрастность, что позволяет легко выявлять отсутствие краевого прилегания на рентгеновском снимке.

5 Простота использования

За счет специальной формулы состава CLEARFIL™ AP-X не прилипает к инструменту, а так же позволяет получать отличный результат при реставрациях фронтальной группы зубов, благодаря своему свойству адаптации при работе с несколькими слоями материала. В то же время материал имеет такую консистенцию, которая позволяет успешно использовать его при реставрации жевательной группы зубов.

Клинический случай


Реставрация полости II класса

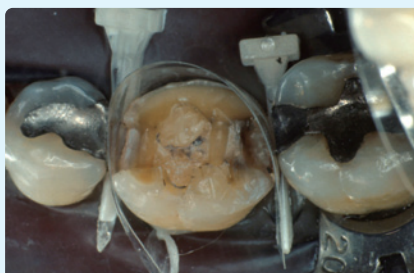


Фотографии предоставлены
Dr. J.Roeters, DDS, Netherland

Физические характеристики CLEARFIL™ AP-X


Прочность на изгиб

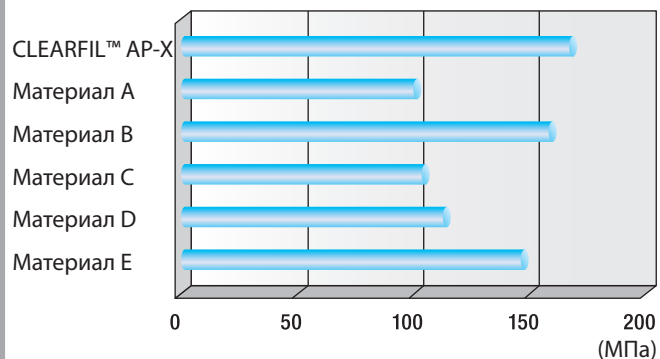

Процент усадки

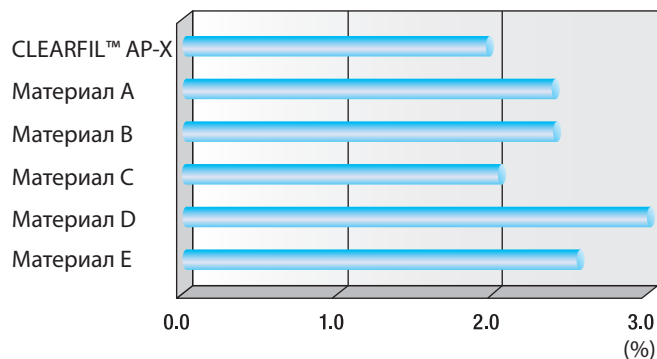

Износоустойчивость

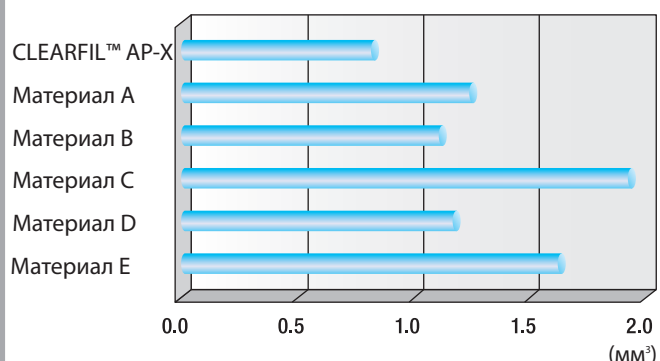

Отдельные шприцы

- #1721WD CLEARFIL™ AP-X (A2)
- #1722WD CLEARFIL™ AP-X (A3)
- #1723WD CLEARFIL™ AP-X (A3.5)
- #1724WD CLEARFIL™ AP-X (A4)
- #1725WD CLEARFIL™ AP-X (B2)
- #1726WD CLEARFIL™ AP-X (B3)
- #1727WD CLEARFIL™ AP-X (B4)
- #1728WD CLEARFIL™ AP-X (C2)
- #1729WD CLEARFIL™ AP-X (C3)
- #1730WD CLEARFIL™ AP-X (C4)
- #1731WD CLEARFIL™ AP-X (XL)

Клиническое применение

Реставрации полостей I, II и V классов полостей жевательной группы зубов

Реставрации полостей III, IV и V классов полостей фронтальной группы зубов

Пришеечные дефекты и дефекты поверхности корня зуба

Сопутствующие материалы

CLEARFIL™ SE Bond
- 2-х этапный самопротравливающийся адгезив



CLEARFIL™ Tri-S Bond
- Одноэтапный самопротравливающийся адгезив



CLEARFIL™ AP-X Esthetics
- светоотверждаемый композитный реставрационный материал



CLEARFIL™ AP-X
- светоотверждаемый текучий композитный материал



- Ознакомьтесь с инструкцией до начала использования материала.
- Данные о сравнениях материалов основаны на результатах исследований, проведенных Kuraray Noritake Dental Inc
- Цвета материалов, приведенных в данной брошюре, могут отличаться от фактических цветов.
- Технические характеристики и внешний вид товара могут быть изменены без предварительного уведомления.

Kuraray Noritake Dental Inc.

Ote Center Bldg.
1-1-3, Otemachi, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0004, Japan
Website : <http://www.kuraraynoritake.com>



Эксклюзивный представитель в России
ООО «ФИРМА ЭКСПОДЕНТ»

+7 (495) 959-93-13 office@expodent.biz
119049, г. Москва, Ленинский пр-т, д.1, оф.1400
+7 (495) 332-03-16 zakaz@expodent.biz
117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.57, оф.522
<http://www.expo-dent.com/> // www.kuraray-noritake.ru/